

QUADRI INTERCETTAZIONE DI AREA CON ALLARME

I quadri intercettazione di area serie QAG – QAGV sono dispositivi progettati e costruiti nel rispetto della direttiva 93/42/CEE e s.m.i ,della norma ISO 7396 -I.

La loro funzione è quella di consentire, grazie alle valvole a sfera, l'esclusione o il passaggio dei gas medicinali in un zona, reparto, e creare una delimitazione ben definita di questi ultimi dal resto dell'impianto.

Nella versione standard a valle di ciascuna valvola è installato un pressostato e una presa di emergenza gas specifica, fatta esclusione per l'impianto di aspirazione (vuoto) dove è previsto a valle della valvola il solo vuotostato.

Per ogni componente suscettibile di interventi di manutenzione/sostituzione è previsto dispositivo di antiritorno, condizione tale da permettere il rapido intervento garantendo la continuità del servizio.

La varie tipologie del quadro sono definite dal numero dei gas in transito, la presenza o meno del gruppo di controllo ed intercettazione del vuoto, la presenza o meno del manometro, e dalla carpenteria di contenimento nelle versioni per l'installazione da incasso a da esterno.



I quadri intercettazione di area serie QAG – QAGV sono dispositivi progettati e costruiti nel rispetto della direttiva 93/42/CEE e s.m.i ,della norma ISO 7396 -I.

La loro funzione è quella di consentire, grazie alle valvole a sfera, l'esclusione o il passaggio dei gas medicinali in un zona, reparto, e creare una delimitazione ben definita di questi ultimi dal resto dell'impianto.


Nella versione standard a valle di ciascuna valvola è installato un pressostato e una presa di emergenza gas specifica, fatta esclusione per l'impianto di aspirazione (vuoto) dove è previsto a valle della valvola il solo vuotostato.

Per ogni componente suscettibile di interventi di manutenzione/sostituzione è previsto dispositivo di antiritorno, condizione tale da permettere il rapido intervento garantendo la continuità del servizio.


La varie tipologie del quadro sono definite dal numero dei gas in transito, la presenza o meno del gruppo di controllo ed intercettazione del vuoto, la presenza o meno del manometro, e dalla carpenteria di contenimento nelle versioni per l'installazione da incasso a da esterno.



DA INCASSO

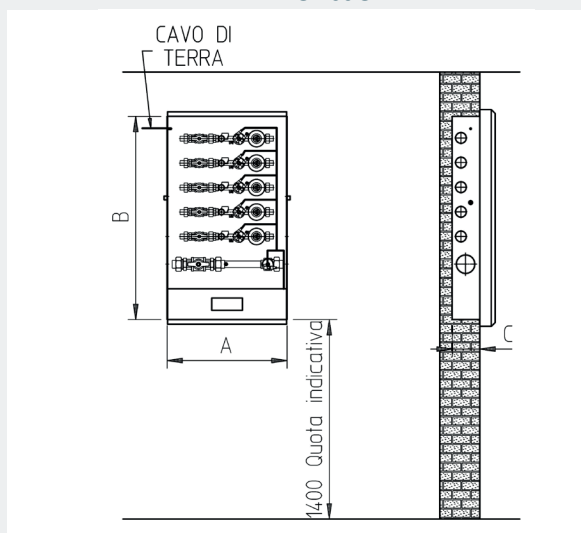

DA ESTERNO

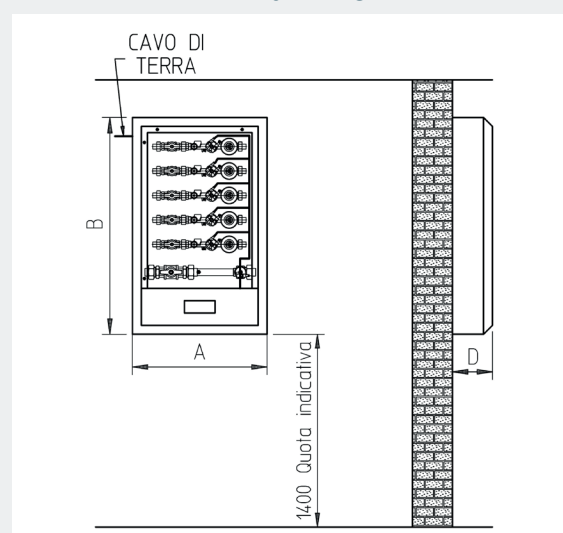

QUADRI DI INTERCETTAZIONE DI AREA SERIE QAG – QAGV

Fondello in acciaio verniciato bianco in versione da incasso o da esterno

- 1 a 6 GRUPPO DI INTERCETTAZIONE E CONTROLLO GAS MEDICINALI costituito da :

1 x 1/2 " valvola di intercettazione a sfera diam. 14.1

1 x blocchetto asportabile con pressostato* per alta/bassa pressione di rete pretarato $\pm 20\%$ di 4 bar

1 x presa di emergenza AFNOR**

1 x predisposizione per l'installazione del manometro

- 1 GRUPPO DI INTERCETTAZIONE E CONTROLLO

ASPIRAZIONE (VUOTO) costituito da :

1 X 3/4 " valvola di intercettazione a sfera diam.22.1

1 x blocchetto per vuotostato pretarato segnalazione basso grado di vuoto (inferiore – 440 mbar).

1 x predisposizione per l'installazione del vuotometro

- 1 centralina di allarme controllo pressioni di rete secondaria



* A richiesta trasduttore di pressione

** UNI 9507 e NIST in alternativa

MOD.	TIPO	LARGHEZZA mm B	ALTEZZA mm A	PROFONDITÀ mm D	INCASSO mm C
QAG	1 gas	440	360	140	90
QAGV	1 gas + V	440	520	140	90
QAG	2 gas	440	520	140	90
QAGV	2 gas + V	440	520	140	90
QAG	3 gas	440	590	140	90
QAGV	3 gas + V	440	590	140	90
QAG	4 gas	440	745	140	90
QAGV	4 gas + V	440	745	140	90
QAG	5 gas	440	745	140	90
QAGV	5 gas + V	440	745	140	90
QAG	6 gas	440	900	140	90
QAGV	6 gas + V	440	900	140	90